



FlexPen 2.0

Ergonomico e flessibile!


Supporto per fibre **FlexPen** 2.0 Ergonomico e flessibile

Il supporto per fibre FlexPen 2.0 di KLS Martin unisce ergonomia, semplicità d'uso e impiego flessibile in un unico strumento.

Il FlexPen 2.0 è un sistema modulare per la guida e il fissaggio di una fibra laser o una guida d'onda, costituito da impugnatura, adattatore Tuohy-Borst e diversi attacchi con mandrino interno.

Massima ergonomia

Grazie al pratico design dell'impugnatura scanalata, lo strumento presenta una presa ottimale e straordinariamente ergonomica, rendendo così più agevole il lavoro dell'operatore.

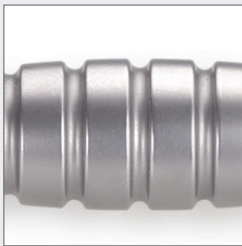

Svariate funzioni

L'attacco Luer-Lock consente di collegare tubi flessibili di irrigazione e aspirazione.




Semplice utilizzo e condizionamento

L'adattatore Tuohy-Borst fissa saldamente la fibra e viene smaltito dopo l'uso – nessun componente di piccole dimensioni o di difficile accesso che potrebbe andare perduto durante lo smontaggio o il condizionamento!



Opportunità d'impiego flessibili:

Non solo i diversi attacchi consentono l'impiego dello strumento in svariate discipline e indicazioni, anche fibre di qualsiasi diametro possono essere inserite e fissate senza problemi.

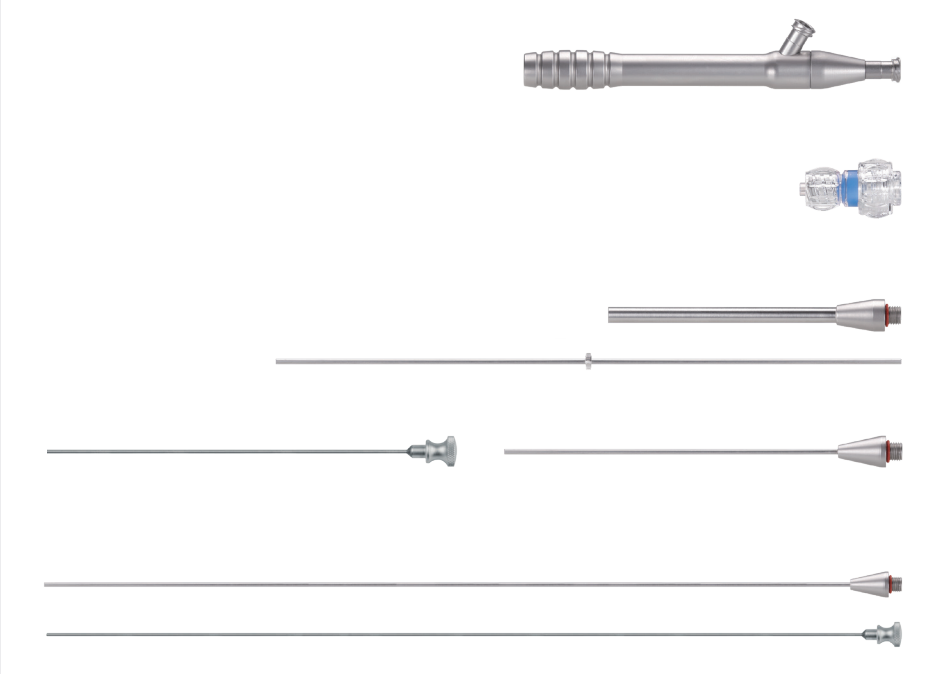	79-311-00-04	Impugnatura supporto per fibre FlexPen 2.0
	79-311-03-04	Adattatore Tuohy-Borst (UV=25 pezzi, sterile, monouso)
	79-311-02-04	Punta 7 cm con aspiratore (2 componenti: tubo di aspirazione e tubo guida-fibra interno)
	79-311-10-04	Punta 10 cm (incl. mandrino)
	79-311-30-04	Punta 30 cm per guida d'onda (incl. mandrino)

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasile
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · Cina
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Emirati Arabi Uniti
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokyo · Giappone
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milano · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malesia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Città del Messico · Messico
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Paesi Bassi
Tel. +31 35 523 45 38
info@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Regno Unito
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Mosca · Russia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Stati Uniti
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

Sapete come si ottiene tutte le informazioni importanti
sui “Dispositivi di Energia” (Energy Devices) di KLS Martin?

Si prega di scaricare l'App Energy Devices di KLS Martin!
L'App è disponibile per Android e iOS.



<https://itunes.apple.com/de/app/klm-martin-energy-devices/id1198171415?l=de&ls=1&mt=8>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klsmartin.energydevices>

KLS Martin SE & Co. KG**Una società del KLS Martin Group**

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germania
Casella postale 60 · 78501 Tuttlingen · Germania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com